


Erlkönig - Stammdaten - Arbeitsplätze

Der Arbeitsplatz bezieht sich auf die Ressourcen des Rechners, auf dem RED läuft, und fasst eine ganze Reihe von Einstellungen zusammen. Dazu zählen beispielsweise die an den Rechner angeschlossenen Drucker, Schnittstellen oder die Telematik-Infrastruktur.

Drucker und Dokumente

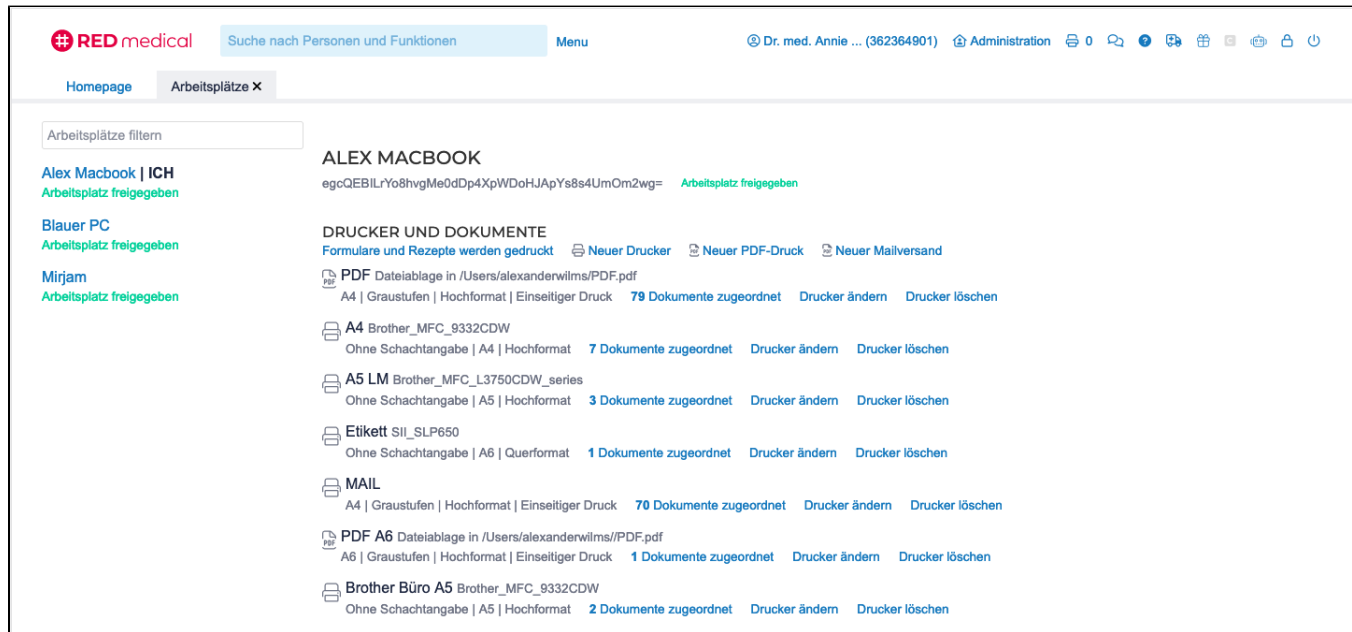

The screenshot shows the RED medical interface. At the top, there is a search bar with the text 'Suche nach Personen und Funktionen' and a 'Menu' button. Below the search bar, there are tabs for 'Homepage' and 'Arbeitsplätze X'. The 'Arbeitsplätze X' tab is active. On the left side, there is a list of workstations: 'Alex Macbook | ICH', 'Blauer PC', and 'Mirjam'. The 'Alex Macbook | ICH' workstation is selected, and its details are shown on the right. The details include the workstation name 'ALEX MACBOOK', a unique identifier 'egcQEBILrYo8hvgMe0dDp4XpWDoHJApyS8s4UmOm2wg=', and a status 'Arbeitsplatz freigegeben'. Below this, there is a section titled 'DRUCKER UND DOKUMENTE' with a sub-header 'Formulare und Rezepte werden gedruckt'. This section lists several printers and documents: 'A4 Brother_MFC_9332CDW', 'A5 LM Brother_MFC_L3750CDW_series', 'Etikett SII_SLP650', 'MAIL', 'PDF A6 Dateiablage in /Users/alexanderwilms/PDF.pdf', and 'Brother Büro A5 Brother_MFC_9332CDW'. Each printer and document entry shows the number of documents assigned to it and options to 'Drucker ändern' or 'Drucker löschen'.

Formulare und Rezepte werden gedruckt/nicht gedruckt - in einigen Fällen sollen in RED zwar Formulare und Rezepte erstellt, aber nicht ausgedruckt werden. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn RED über die RED Interchange-API mit einem anderen System verbunden wird. In diesem Fall kann sich das andere System alle in RED erstellten Formulare als PDF-Dokumente holen. Im Normalfall sollte diese Einstellung aber auf **werden gedruckt** stehen.

Neuer Drucker - RED zeigt Ihnen nach einem Moment eine Übersicht aller am Arbeitsplatz angeschlossenen Drucker. Sie können den gewünschten Drucker aus dieser Übersicht auswählen. Hat der Drucker mehrere Papierschächte, ist für jeden Schacht eine eigene Auswahl mit der Größe des im Schacht liegenden Papiers zu treffen. Nachdem Sie einen Drucker ausgewählt haben, wird RED Sie dazu auffordern, neben anderen Einstellungen die Papierform und -größe zu definieren und Dokumente zuzuordnen.

Neuer PDF-Druck - Formulare und Rezepte können anstelle eines Druckers auch als PDF-Dokument im lokalen Dateisystem abgespeichert werden. Wählen Sie diese Option, müssen Sie RED angeben, wo die Dokumente gespeichert werden sollen. Sie können bestimmen, wie der Dateiname aufgebaut werden soll, und schließlich die Dokumente zuordnen, die mit diesen Einstellungen als PDF-Datei gespeichert werden sollen.

Neuer Mailversand - Formulare und Rezepte können statt Ausdruck oder PDF-Dokument auch per E-Mail an den Patienten verschickt werden. Dazu müssen Sie angeben, von welchem Benutzerkonto die E-Mail versandt werden soll. Anschließend müssen Sie die Dokumente auswählen, die über dieses E-Mail-Konto verschickt werden können. Bitte beachten Sie, dass der Versand per E-Mail wegen der fehlenden Verschlüsselung unsicher ist und der Patient diesem zustimmen muss.

Drucker einrichten